




NADAL[®] PROM Amniotic Fluid Test

Katalogové číslo: 431006N-01/431006N-03/431006N-10/431006N-20

Rychlý kvalitativní protilátkový test na detekci plodové vody (IGFBP-1) ve vaginálním sekretu.

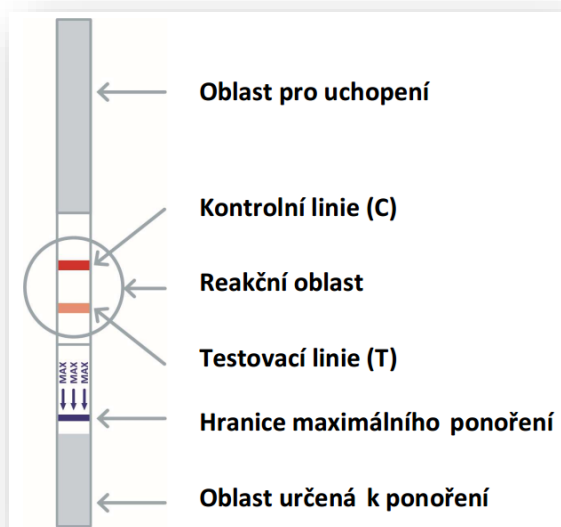

Vysoce citlivá a specifická diagnostika pomocí proužku PROM (Premature Rupture of Fetal Membranes). Jde o proužkový imunochromatický kvalitativní test k detekci plodové vody ve vaginální sekreci. Přítomnost plodové vody se určuje detekcí inzulínu podobného růstového faktoru 1, (insulin-like growth factor binding protein-1) IGFBP-1, jehož koncentrace v plodové vodě je 100–1000× vyšší než v séru matky. Za normálních okolností IGFBP-1 není ve vagíně přítomen, ale po ruptuře plodových obalů se plodová voda s vysokou koncentrací IGFBP-1 mísí s vaginální sekrecí.

Obsah soupravy

- jednotlivě balené testovací proužky
- sterilní výtěrové tampóny
- zkumavky na vzorek s extrakčním pufrem
- stojan na zkumavky

Charakteristiky testu

Analytická senzitivita : 5 ng/mL IGFBP-1

Senzitivita : 97,6 %

Specifická : 97,8 %

Odečet výsledku : po 5 minutách



Cena na vyžádání.



Objednávky vyřizuje:

JK-Trading s.r.o.
Křivatcová 421/5,
155 21 Praha 5-Zličín
tel.: 257 220 760
email: paha@jktrading.cz

Více informací:

Čechy - Ing. Kryl: 777 929 604
Ing. Ernestová: 777 477 308
Morava – Ing. Žurová: 777 929 623