



NADAL[®] Tuberculosis IgG/IgM Test

Katalogové číslo: 322003N-30

Rychlý kvalitativní protilátkový test na detekci protilátek proti *Mycobacterium Tuberculosis (M.Tb)* v lidském séru, plazmě nebo v plné krvi.


Obsah soupravy

- jednotlivě balené testovací kazety
- plastové kapátko
- desikant
- roztok na ředění vzorku, 1x5ml
- příbalový leták


Další potřebný materiál

- stopky
- lancety pro získání vzorku plné krve

Jednoduchý postup

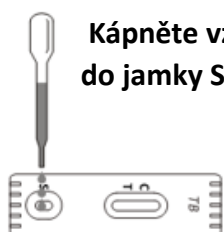

Kápněte vzorek do jamky S

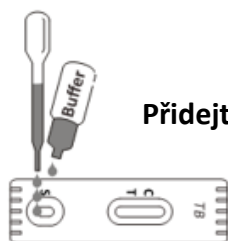

Přidejte pufr

po 15 minutách odečtěte výsledek



pozitivní

negativní

neplatný

Charakteristiky testu (srovnání s ELISA metodou)

IgM protilátky

Relativní senzitivita: 85.7%
Relativní specifita: 96.5%
Celková shoda: 94.9%

IgG protilátky

Relativní senzitivita: 88.6%
Relativní specifita: 96.5%
Celková shoda: 95.3%

Cena na vyžádání

Balení 30 testů



Objednávky ČR:
JK-Trading s.r.o.,
Křivaticová 421/5,
155 21 Praha 5-Zličín
tel.: 257 220 760
email: paha@jktrading.cz

Objednávky SK:
JK-Trading s.r.o.,
Dlhá 1264/43,
900 31 Stupava
tel.: 0907 670 888, 0264 776 790
email: jk-trading@jk-trading.sk

Více informací:
Ing. Kryl 777 929 604
Ing. Žůrová: 777 929 623
www.jktrading.cz
www.jk-trading.sk